

Instruções de utilização

Por favor leia estas informações cuidadosamente, pois irão ajudá-lo a utilizar HYLO FRESH® da forma correta.

HYLO FRESH®

Hialuronato de sódio 0,3 mg/ml

Para o alívio de olhos irritados.

Colírio estéril, sem fosfatos e sem conservantes.

O que é HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® é uma solução estéril sem conservantes para uso ocular.

Composição:

1 ml HYLO FRESH® contém 0,3 mg de hialuronato de sódio, tintura-mãe original de Eufrásia, tampão de borato e água.

Para que é utilizado HYLO FRESH®?


Para o alívio de olhos irritados.

Quando deve HYLO FRESH® ser utilizado?

HYLO FRESH® é utilizado para o alívio de olhos irritados. Os olhos irritados e secos podem resultar de stress ambiental tal como uma atividade baseada no uso intensivo de computadores, clima seco, seca, aumento da radiação solar, poluição do ar causada por poeira ou pólen, ou por utilizar lentes de contacto. Os preparados de Eufrásia (*Euphrasia officinalis*) são utilizados tradicionalmente há centenas de anos para o tratamento de irritação da conjuntiva, com olhos vermelhos e ardor, aumento da secreção de lágrimas, inchaço e vermelhidão das pálpebras ou margens das pálpebras. Para além disso, HYLO FRESH® contém hialuronato de sódio. O hialuronato de sódio aumenta a viscosidade da solução hidratante e esta fica mais espessa que a água. Dessa forma, ela permanece na superfície ocular durante mais tempo. A aplicação do colírio alivia os olhos e pálpebras irritados e obtém uma hidratação semelhante à de uma lágrima. São assim tratados todos os sintomas que são causados pelo secar da superfície do olho, p. ex., devido a não serem produzidas lágrimas naturais suficientes pelo organismo. HYLO FRESH® é utilizado para a hidratação dos olhos mesmo quanto se utilizam lentes de contato. HYLO FRESH® é muito bem tolerado, uma vez que não contém conservantes. Para além disso, HYLO FRESH® não contém fosfatos, pelo que são evitadas as possíveis complicações devido à formação de precipitados na córnea.


Como se utiliza HYLO FRESH®?

Utilize HYLO FRESH® apenas se o selo da embalagem estiver intato antes da primeira utilização (☉).

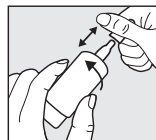


Etapa 1:

Remover a tampa antes de utilizar. Para isto, manter a tampa levemente sobre o frasco e retirar com a outra mão o frasco da tampa com um movimento rotatório. Antes da primeira aplicação, por favor faça girar o frasco de HYLO FRESH® com a sua extremidade para baixo e pressione o fundo do frasco até que a primeira gota apareça no adaptador. O frasco está agora pronto a ser utilizado.

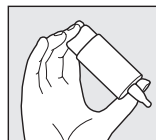

Etapa 2:

Segure o frasco invertido com o polegar na curvatura do frasco e os restantes dedos no fundo do mesmo.

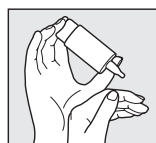


Etapa 3:

Apoie a mão a segurar o frasco COMOD®, tal como demonstrado para a outra mão.



Etapa 4:

Incline ligeiramente a sua cabeça para trás, afaste ligeiramente a sua pálpebra inferior e aplique uma pressão forte e breve na parte central do fundo do frasco. Isto ativa o mecanismo para a libertação de uma gota. Devido ao sistema de válvulas especial COMOD®, o tamanho e a velocidade de cada gota são idênticos independentemente de quanta pressão seja aplicada. Feche lentamente os seus olhos para permitir que o fluido se espalhe de forma igual pela superfície do olho.

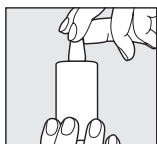

Etapa 5:

Volte a colocar a tampa imediatamente após a utilização. Assegure-se que a ponta do aplicador está seca. Quando aplicar o fluido, por favor evite qualquer contacto entre a extremidade do frasco e o seu olho ou pele.

O frasco COMOD® liberta aproximadamente 10 ml de solução, o que equivale a aproximadamente a 300 gotas. Por motivos técnicos, permanece sempre um pequeno volume residual de líquido no frasco no final da sua utilização.

A duração da utilização de HYLO FRESH® não tem um limite definido.

Apenas deve ser tratada uma pessoa com cada frasco de HYLO FRESH®.

O que mais precisa de saber?

Caso utilize quaisquer outros colírios, deve ser respeitado um intervalo mínimo de 30 minutos entre as aplicações, e HYLO FRESH® deverá sempre ser aplicado em último lugar. No entanto, as pomadas oftálmicas deverão ser sempre aplicadas após utilizar HYLO FRESH®.

Uma vez que não contém conservantes, HYLO FRESH® é muito bem-tolerado mesmo quando utilizado ao longo de um período de tempo alargado. Foram relatados casos muito raros de reações de hipersensibilidade, tais como ardor ou lacrimejamento excessivo, que desapareceram imediatamente quando a utilização de HYLO FRESH® foi interrompida.

Para evitar as reações de incompatibilidade que são possíveis devido a interações entre os produtos para lentes de contato e HYLO FRESH®, recomenda-se um intervalo de cerca de 30 minutos após a inserção de lentes de contato para aplicar o colírio.

De acordo com os conhecimentos existentes, HYLO FRESH® pode ser utilizado em crianças, mulheres grávidas e mulheres a amamentar.

Com que frequência e durante quanto tempo pode utilizar HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® deve ser utilizado de acordo com as instruções dadas pelo seu médico. De uma forma geral, aplica-se uma gota de HYLO FRESH® em cada olho, três vezes ao dia. Se necessário, poderá também ser utilizado com mais frequência. Caso utilize HYLO FRESH® com mais frequência (p. ex. mais de 10 vezes por dia), por favor contacte o seu oftalmologista. HYLO FRESH® é considerado adequado para tratamento de longa duração. Se os sintomas persistirem, deve consultar o seu oftalmologista.

Quando não deve utilizar HYLO FRESH®?

HYLO FRESH® não deve ser utilizado se tiver hipersensibilidade a qualquer um dos componentes.

O que precisa de saber acerca de conservar HYLO FRESH®?

Não conservar acima de 25 °C (↙ 25 °C).

HYLO FRESH® pode ser utilizado durante 6 meses após a abertura.

Não utilize após a data de validade (📅).

Manter fora do alcance das crianças.

Estão disponíveis as seguintes apresentações:

10 ml de colírio

Data da última revisão:

Janeiro 2018

Fabricante (🏭):

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Alemanha

Distribuído por:

URSAPHARM, UNIPESSOAL LDA.
Avenida D. João II, N.º 20, 1º Andar, Parque das Nações
1990-095 Lisboa, Portugal
E-mail: info@ursapharm.pt



Dispositivo médico